

FloPoint® Elite

“美那松”無線尿流速分析儀

使尿流速測量更簡易



FloPoint® Elite Uroflow System

FloPoint® Elite可測量和記錄病患的尿流型態，讓醫師能迅速評估尿流力學，以診斷排尿過程的異常現象。

FloPoint® Elite方便及容易使用，利用數位的無線技術使臨床診斷更有效率。攜帶方便、輕巧且耐用，“態能”無線尿流速分析儀可適用於臨床配置及安裝。

安裝在一個標準廁所，沒有不合宜的椅子，能讓病患輕易使用且減少清理上的麻煩。安裝只需要幾秒鐘，不會有髒亂的尿杯讓工作人員處理。

- 幫助評估尿流力學及診斷排尿過程的異常現象(例如：阻塞或者流動受限)
- 迅速記錄和繪製出尿流圖像，峰值流速、排泄量及其他基本測量的數據
- 提供測量結果讀數，列印及選擇透過符合HIPAA的ScanPoint®系統處理的電子病歷
- 方便的線上校準
- Medicare 核准給付，CPT 代碼 51741

“美那松”無線尿流速分析儀

使尿流速測量更簡易


FloPoint® Elite 技術

FloPoint® Elite 無線尿流速分析儀的先進技術提供一種準確及方便評估膀胱功能的方法，FloSensor 能記錄和無線傳輸病患的測量數據到 ScanPoint® 接收器，這些數據可以幫助判斷，例如病患是否有阻塞且需要被治療，ScanPoint® 也能夠將測量數據儲存並且提供合適的測量報告。


FloSensor 是輕便的且在測量時適用於標準的廁所馬桶裡。在不使用時，它是裝載於 FloCharger 內讓 FloSensor 電池充電。

提供基本測量數據以評估膀胱功能

- 最大流速和平均流速
- 最大流速的時間
- 排泄量
- 尿流時間及排尿時間
- 尿流型態

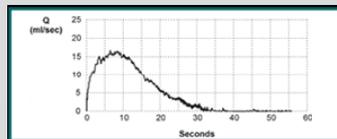

常態流動數據圖像

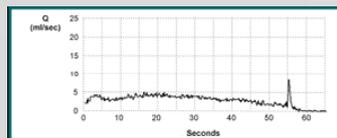

膀胱出口阻礙

FloPoint® Elite 特色：

- 安裝迅速，易於清潔
- 方便於病患
- 數位流速
- 錄音註解
- 無線數據傳輸

FloPoint® Elite包括：

- FloSensor 和 FloCharger
- ScanPoint® 接收器，吊繩和啓動工具
- FloPoint Elite® 操作手冊及簡易操作卡
- ScanPoint® 教學光碟
- 漏斗50包
- ScanPoint® 傳輸座
- 1年的準確性校正

尺寸：

FloCharger – 高27.5公分、寬19.5公分、重1.1公斤

ScanPoint® Remote – 高17.5公分、寬6.25公分、重160公克

FloSensor – 握柄以上的位置：高26公分、寬17公分、重1.05公斤

注意事項：

- FloPoint® Elite使用者需先受過訓練並取得醫師或醫療機構授權
- FloPoint® Elite，請先詳閱操作說明書

警告：本儀器不適用於胎兒、使用本儀器時請遠離揮發性麻醉劑。

製造廠：

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway / Bothell, WA 98011 USA
Tel : 425.867.1348

台灣總代理

態能企業有限公司
台北市忠孝東路三段 162 號 2 樓之一
電話: 02-27811915
網址: www.talentmed.com.tw

